


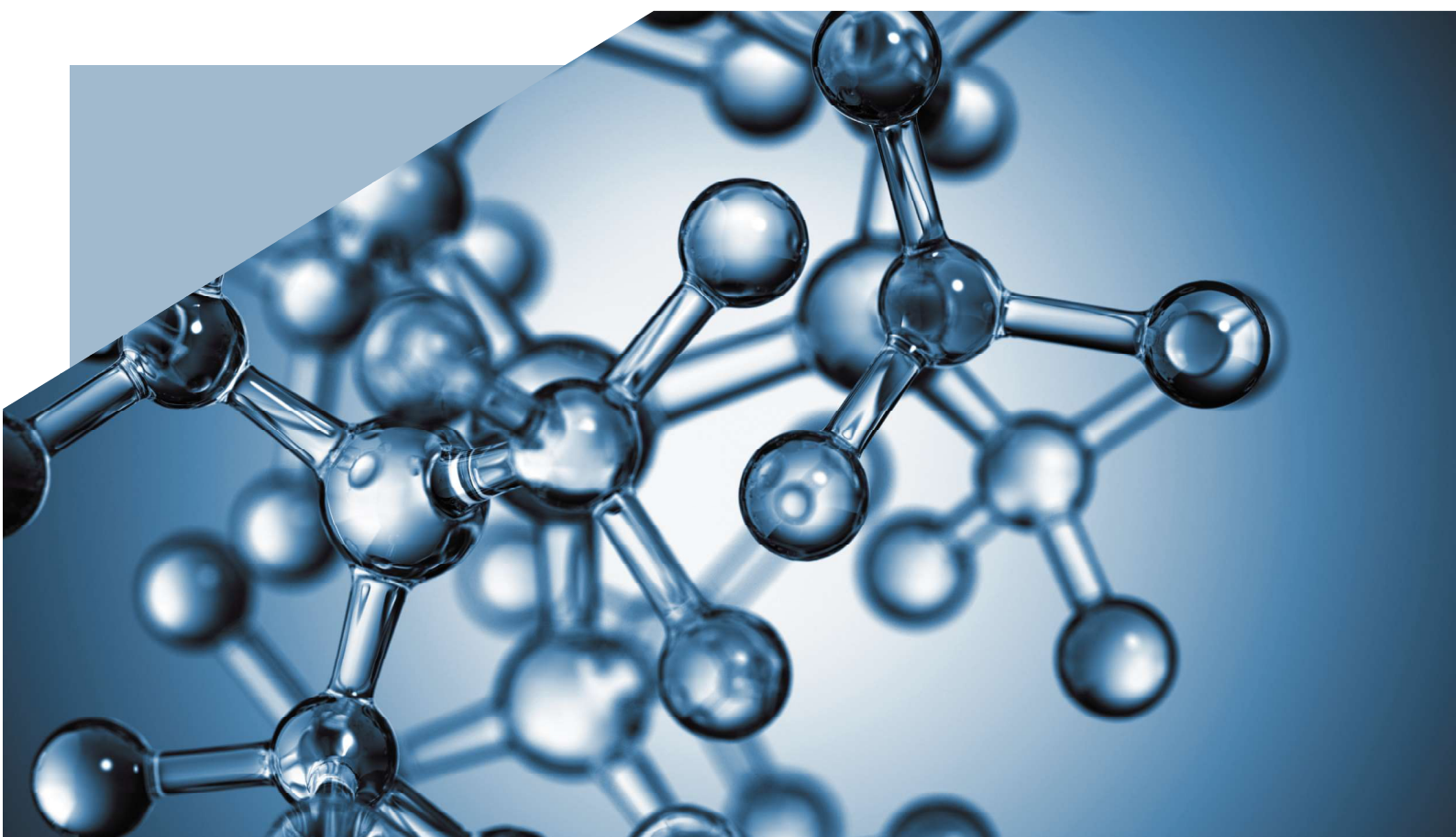

Product Catalogue

产品目录

Ultrasonic Cleaner

超声波清洗机



PrimaSci是超声波清洗行业的领导者，拥有精密超声清洗技术，长久以来一直领导着整个行业的发展。PrimaSci超声波清洗器是集先进的设计理念和核心技术于一身，是一款性能稳定、操作简单、功能齐全、通用性强的超声波清洗产品。

产品符合BSI要求

超声波频率40kHz

附多项配件可供选择：不锈钢网状提篮、不锈钢盆、不锈钢盖，满足您不同的使用要求！

Application | 应用领域

电脑硬盘零部件的清洗 印刷电路板清洗 芯片清洗 光通信元器件的清洗 光学玻璃零件的清洗 晶体清洗 精密零件及管件除油清洗

TL Series | TL系列

LCD液晶显示，控制加热温度(最高温度99)，定时器(0-99分钟)及Power等级调节

- LCD液晶显示，同时显示超声频率，溶液温度、超声时间和能量等级
- 1-99分钟时间可调，精确计算到秒
- 0℃-99℃温度可调
- 特殊材料外沿设计可以经受非水基溶液腐蚀，清洗器的内槽采用优质不锈钢板一次冲压成行
- 专供常规水溶性清洗剂使用，产品性价比高
- 使用40kHz工业用振子，清洗效力更强劲，另有28khz、68khz、120khz可选
- 柔性线路板控制，操作简便，更具安全性、稳定性
- 仪器累计工作时间达999999小时，显示累计工作时间，实现合理“三包”
- 具有高低五档输出电功率选择功能
- 工作参数断电记忆功能
- 清洗器的每个超声换能器发射功率为60W

TD Series | TD系列

数字式电子控制加热温度(最高温度80)，定时器(0-99分钟)

- 0-99分钟时间可调，精确计算到秒
- 0℃-80℃温度可调
- 工业级单片机芯片控制
- 数码显示器，时间、温度一目了然
- 柔性线路板控制，更具安全性、稳定性
- 超声波频率40KHz，另有25KHz可选

Specifications | 技术参数

型号	容积 (L)	槽体尺寸 (长×宽×高) (mm)	外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	功率 (W)	重量 (Kg)	功能说明
PM1-300TD	3	240×140×100	270×170×240	120	3.5	数字式控制加热温度/定时
PM2-600TD	6	300×155×150	330×180×310	180	5.5	数字式控制加热温度/定时
PM3-900TD	9	300×240×150	330×270×310	240	7.8	数字式控制加热温度/定时
PM3-900TL			330×270×360			LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM4-1300TD	13	355×325×150	360×330×310	360	13.5	数字式控制加热温度/定时
PM4-1300TL			330×330×360			LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM5-2000TD	20	530×325×150	550×330×310	480	14.5	数字式控制加热温度/定时
PM5-2000TL			550×330×360	600		LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM6-2700TD	27	530×325×200	550×330×360	600	15.3	数字式控制加热温度/定时
PM6-2700TL			550×330×410	720		LCD液晶显示/定时/加热/能量等级

Dry Bath Heating System

PMD恒温试管架



PMD恒温试管架是采用微电脑控制的恒温金属浴装置，以代替传统的水浴装置，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

二种型号可选，PMD1、PMD2；分别配有1、2个槽
简单易操作，设置精确

清晰地数字显示，在较远距离也能即时读数

方便的定时器，响铃振动,可用于反应定时和功能定时
便捷的模块更换，便于清洁与消毒

温度偏差校准功能

过温断电保护功能，保证样品和工作环境的安全

自动故障检测及蜂鸣器报警功能

Specifications | 技术参数

型号/订货号	PMD1	PMD2
控温范围℃	室温+5~150	
加热时间	<25min(从20℃ to 100℃)	
槽内模块均一性@37℃	≤±0.1℃	
槽间模块均一性@37℃	≤±0.2℃	
显示精度	0.1℃	
时间设定	1min~999min	
最高温度℃	150	
最大功率 W	125	200
尺寸W/D/H(mm)	200 x 295 x 80	
重量Kg	2.1	2.8

Accessories | 附件

槽型号	每槽孔数	试管直径孔深 (mm)	槽型号	每槽孔数	试管直径孔深 (mm)
PM-13	20	Φ13mm×47	PM-E0	64	0.2mlEP管
PM-17	12	Φ17mm×45	PM-E1	20	0.5mlEP管
PM-20	12	Φ20mm×48	PM-E2	20	1.5/2.0mlEP管
PM-25	6	Φ25mm×45	PM-29	4	Φ29mm×45

可选模块：（适用于PMD1、PMD2）注意：PMD1、PMD2分别能容纳1、2个槽，外围尺寸均为：80 x 105 x 50mm

Mini Cooling Dry Bath Incubator

PMC制冷干浴器



PMC制冷干浴器采用半导体加热元件Peltier，升降温迅速，仪器可配置多种模块，适用于酶学反应，血样本制冷，变性电泳DNA样品制备，存放冷冻限制性酶；连接反应；PAGE蛋白溶解，杂交温育等。

Product Features | 产品特点

- 强大的可编程功能实行多个温度点的控制
- 采用半导体加热元件Peltier，升降温迅速
- 外形精巧，体积小，节省宝贵的实验空间
- 预设温度快速启动及温度校准功能
- 过温断电保护功能，保证样品和工作环境的安全
- 方便的定时器，响铃振动，可用于反应定时和功能定时
- USB及蓝牙接口，方便数据传输及编辑
- 标配安全盖，保护样品不受污染，防止烫伤工作人员
- 便捷的模块更换，便于清洁与消毒
- 可选12V车载电源适配器，便于携带

Specifications | 技术参数

型号/订货号	PMC
控温范围℃	-10 ~ 100
显示精度 ℃	0.1
温度均一性@37℃	± 0.2
温度稳定性@37℃	± 0.2
制冷速率(Max) ℃/min	5.5
加热速率(Max) ℃/min	6.0
时间设定	1min ~ 9999min或连续
功率W	60
操作模式	1至4步程序控制及9个运行周期
	快速启动功能
尺寸W/D/H(mm)	185x 150 x 135
重量Kg	0.6

Accessories | 附件

槽型号	每槽孔数	试管直径孔深 (mm)	槽型号	每槽孔数	试管直径孔深 (mm)
PM-F1	32	0.2mlEP管, Φ6.35mm × 19	PM-F4	12	1.5/2.0mlEP管, Φ11mm × 30
PM-F2	12	1.5mlEP管, Φ10.8mm × 28.5	PM-F5	6	15ml, Φ17.3mm × 70
PM-F3	12	0.5mlEP管, Φ8mm × 25	PM-F6	2	50ml, Φ29.2mm × 72

注意：PMC可容纳1个模块，外围尺寸均为：47 x 71 x 32mm or 47 x 71 x 75mm

Open Heated Bath

YB系列恒温水浴槽



- 数字PID控制，全程快速、精确加热控制
- 数显温度校正及搅动循环泵，保证温度准确性
- 简单、人性化的用户界面，新用户也能快速掌握
- 不锈钢外壳和内槽，抗腐蚀,易于清洁，满足高强度的使用要求
- 多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
- 断电记忆功能，大大提高工作效率，绿色环保

Specifications | 技术参数

型号	YB8	YB12	YB26
容积/L	8	12	26
外围尺寸L/W/H mm	330/175/300	330/265/300	330/530/300
温度范围/℃		室温+5-99	
温度设置范围/℃		0-99	
稳定性/℃		±0.1	
温度设定		数字式	
温度显示		3位数字LED	
工作容量L/W/H mm	275/155/200	275/235/200	275/475/200
总功耗220-240V kW	0.6	1.0	1.5
电压/V		220-240	
样品保护		可调断电保护，低温报警，高温保护	
排水功能		有	

Accessories | 附件

型号	YB8	YB12	YB26
透明聚碳酸酯盖	AQL8	AQL12	AQL26
不锈钢山型盖	LT8	LT12	LT26

Heated Circulating Bath

HD120数控式恒温循环水浴锅



独立控制器，适合于槽内外的温度控制与测量
 控制器温度-30~120℃可调
 适用温度范围：室温+5~99℃
 内置强泵最大流率16L/min，最大压力280mbar
 五个便捷的独立按键，提供精确、方便的设置
 高亮大屏幕显示，即使从远距离也能准确地读数
 可视闹钟，操作完成时及时提醒用户
 用户校准功能，便于在所需的操作温度下达到最大精度
 多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
 全封闭的磁力泵循环搅拌系统，保持精确的温度和均匀性
 大开口槽和外循环装置，可轻松实现一机两用，节省成本

Specifications | 技术参数

型号/订货号			HD120-T8	HD120-T12	HD120-T26
浴槽容积		L	8	12	26
温度范围		℃	室温+5 ~ 99	室温+5 ~ 99	室温+5 ~ 99
稳定性	@37℃	±℃	0.02		
均一性	@37℃	±℃	0.05		
设置分辨率		℃	0.1		
显示			4位LED		
显示分辨率		℃	0.1		
定时功能			1min-99h59min		
一键校准			是		
加热功率	220-240V	kW	1.5		
泵	最大压力	mbar	280		
(水)	最大流量	L/min	16		
管直径	进口/出口	mm	13		
安全性	温度过高		可调断电保护		
	液体平面		防干烧		
警报			低温警报高响铃		
电源	230V	kW	1.5 (50/60Hz)		
顶端开口	L/W	mm	142/130	230/148	290/350
液体深度	最小/最大	mm	60/190	60/190	60/190
内部尺寸	L/W/H	mm	275/155/200	275/235/200	275/475/200
外围尺寸	L/W/H	mm	398/180/300	398/265/300	330/595/300
外围尺寸 (含控制器)	L/W/H	mm	398/180/430	398/265/430	330/595/430
排水功能			有		

Refrigerated Circulating Bath

HD120-RT8/RT12制冷型恒温水浴锅



独立控制器，适合于槽内外的温度控制与测量

控制器温度-30 ~ 120℃可调

冷却/加热范围：-30~100℃及 -16~100℃可选

内置强泵，最大流率16L/min,最大压力280mbar

五个便捷的独立按键，提供精确、方便的设置

高亮大屏幕显示，即使从远距离也能准确地读数

可视闹钟，操作完成时及时提醒用户

用户校准功能，便于在所需的操作温度下达到最大精度

多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全

全封闭的磁力泵循环搅拌系统，保持精确的温度和均匀性

大开口槽和外循环装置，可轻松实现一机两用，节省成本

底部排水功能，让使用更加便捷

稳定性±0.1℃

Specifications | 技术参数

型号/订货号			HD120-RT8	HD120-RT12
浴槽容积		L	8	12
温度范围		℃	-16 ~ 100	-30 ~ 100
稳定性	@37℃	±℃	0.02	
均一性	@37℃	±℃	0.05	
设置分辨率		℃	0.1	
显示			4位LED	
显示分辨率		℃	0.1	
定时功能			1min ~ 99h59min	
冷冻剂			R134a	
一键校准			是	
加热功率	220-240V	kW	1.5	
泵	最大压力	mbar	280	
(水)	最大流量	L/min	16	
制冷功率	@ 20℃	W	350	400
制冷功率	@ 0℃	W	200	220
管直径	进口/出口	mm	13	
安全性	温度过高		可调断电保护	
	液体平面		防干烧	
警报			低温警报高响铃	
电源	230V	kW	1.5 (50/60Hz)	
顶端开口	L/W	mm	168/178	295/178
液体深度	最小/最大	mm	60/150	60/150
内部尺寸	L/W/H	mm	168/348/160	295/348/160
外围尺寸	L/W/H	mm	230/500/480	360/500/480
外围尺寸 (含控制器)	L/W/H	mm	230/500/610	360/500/610
排水功能			有	

*注：如果不需要制冷单元可单独关闭，制冷单元工作温度最高可达96℃。

Boiling Water Bath

PBB系列沸水浴槽



数字PID控制，全程快速、精确加热控制100℃
调节器可调节到一个稳定的、非暴沸、无飞沫和大量蒸汽的状态
简单、人性化的用户界面，新用户也能快速掌握
不锈钢外壳和内槽，抗腐蚀,易于清洁，满足高强度的使用要求
多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
断电记忆功能，大大提高工作效率，绿色环保
设计特点：恒定水浴装置，避免人工监测和加水过程
PBB系列产品同样适合于日常性使用,标配山型水浴盖，以防烫伤

Specifications | 技术参数

型号	PBB8	PBB12	PBB26
容积/L	8	12	26
外围尺寸L/W/H mm	330/175/300	330/265/300	330/530/300
温度范围/℃	室温+5-100		
温度设置范围/℃	0-100		
温度显示	3位数字LED		
工作容量L/W/H mm	275/155/200	275/235/200	275/475/200
总功耗220-240V kW	0.6	1.0	1.5
电压/V	220-240		
样品保护	可调断电保护，低温报警，高温保护		
排水功能	有		

*注:标配透明聚碳酸酯盖

Shaking Water Bath

PLS200水浴摇床



PrimaSci线性震荡浴槽是一套性能优良的实验室产品，可以满足高稳定性和多功能需求。浴槽采用了PrimaSci一贯的风格，现代的外观。

Product Features | 产品特点

- 强力驱动装置：运行平稳，速率范围大
- 多达六步程序控温，最多99步循环
- 内置加热和温度感受器，工作范围广、易清洗
- 独特的温度及振荡速率的显示及控制
- 通用型温度范围为：室温+8℃到99℃，Plus款带制冷系统，可降温至-5℃
- 数字PID控制及搅拌系统，可以满足快速升温和高精度控制要求
- 温度稳定性：± 0.1℃
- 多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
- RS232通讯接口及多种托盘可选

Specifications | 技术参数

型号/订货号		PLS200	PLS200 Plus
充液容积	L	5-28	5-28
温度范围	℃	环境 +8 to 99	-5 to 99
稳定性	@37℃	± 0.1	± 0.1
均匀性	@37℃	± 0.1	± 0.1
温度显示	℃	4位数字LED	4位数字LED
分辨率	℃	0.1	0.1
线性震荡范围	/min	0 to 200	0 to 200
线性震荡振幅	mm	22	22
震荡盘尺寸	mm	420 × 235	420 × 235
工作容量(L/W/H)	mm	480/295/200	480/295/200
外形尺寸(L/W/H)	mm	700/380/420	700/380/420
浸入深度min/max	mm	20 to 180	20 to 180
消耗功率KW	230V	1.5	0.25/1.5 (制冷/加热)
温度保护		高低温保护及防干烧功能	
电源规格	V	220-240	
排水功能		有	

Accessories | 附件

透明聚碳酸酯盖	AQL26
不锈钢山型盖	LT26
通用托盘	UT28
试管托盘	TT28
平托盘	UTP28
试管架	H14

H1 可选夹具	管尺寸
H1 - 10	48X10mm tubes
H1 - 13	44X13mm tubes
H1 - 16	24X16mm tubes
H1 - 19	21X19mm tubes
H1 - 25	12X25mm tubes
H1 - 30	10X30mm tubes
H1 - LE	48X1.5ml microtubes

*低于环境温度需要选择带制冷系统的Plus款；注：在高于60℃或者低于室温时建议选择盖子

Clear View Refrigerated And Heating Bath

双视程控低温水浴



程控式透明低温循环水浴可观察被恒温液体介质颜色、流动和化学反应状况，特别适于教学及科研使用，也可满足实验室一些常规应用；双视程控低温水浴广泛适用于生物工程医药、食品、化工、冶金、石油等领域。

Product Features | 产品特点

- 数字PID控制，全程快速、精确制冷加热控制
- 多达六步程序控温，最多99步循环
- 一体式桌面型制冷水浴更节省空间
- 数显温度校正及搅动循环泵，保证温度准确性
- 简单、人性化的用户界面，新用户也能快速掌握
- 透明双视窗方便随时掌握实验进展
- 多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
- 断电记忆功能，大大提高工作效率，绿色环保

Specifications | 技术参数

型号		YT-R26C05	YT-R26C5	YT-R26C15
浴槽容积	L	26	26	26
恒温范围	℃	5~90	-5~90	-15~90
稳定性	@37℃	±0.02℃		
均一性	@37℃	±0.05℃		
设置分辨率	℃	0.1		
加热可调速率	@25℃	0.01~1℃/min		
制冷可调速率	@25℃	0.01~0.5℃/min		
外形尺寸（W / D / H）	mm	700/375/420		
液槽尺寸（W / D / H）	mm	290/305/330		
液槽开口（W / D）	mm	Φ250		
加热功率	W	1500		
压缩机	W	120	120	150
温度保护		高低温保护及防干烧功能		
电源	V	220-240		
排水功能		有		

Refrigerated Circulators

PC1600冷却水循环器



PC1600冷却水循环器因其冷却效率高，泵压大，温度稳定性好等特点，非常适合所有需要将热量快速准确带走的应用；如：激光设备、电镜、材料试验机、核磁共振仪、原子吸收光谱仪、ICPMS、高压反应釜、夹套式反应装置、发酵装置、电泳设备、粘度计、旋光仪、流变仪、流变仪、全自动合成仪等。

Product Features | 产品特点

- 先进的热气旁路技术与PID控温结合，控温精度达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 控温范围 $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$
- 内置强泵，最大流率 $7\text{L}/\text{min}@4\text{bar}$
- 高亮大屏幕显示，即使从远距离也能准确地读数
- 可视闹钟，操作完成时及时提醒用户
- 水位观察窗和自动水位检测装置，低液位蜂鸣器自动报警
- 多级安全保护，防过热，防烧干，过流保护，以保证样品及工作场所的安全
- 全封闭的磁力泵循环搅拌系统，保持精确的温度和均匀性
- 底部排水功能，让使用更加便捷
- 具有可选的RS232/RS485通讯接口、外接温度传感器等功能

Specifications | 技术参数

型 号			PC1600
浴槽容积		L	3/5
温度范围		$^{\circ}\text{C}$	$-10 \sim 40$
稳定性	@ 37°C	$\pm^{\circ}\text{C}$	0.02
均一性	@ 37°C	$\pm^{\circ}\text{C}$	0.05
设置分辨率		$^{\circ}\text{C}$	0.1
显示			4位LED
显示分辨率		$^{\circ}\text{C}$	0.1
定时功能			1min 99h59min
泵	最大压力	bar	4
(水)	最大流量	L/min	25
制冷功率	@ 20°C	w	1600
管直径	进口/出口	mm	13
安全性	温度过高		可调断电保护
	液体平面		防干烧
警报			低温警报高响铃
排水功能			有
电源	230V	kw	1.6 (50/60Hz)
外围尺寸	l/w/h	mm	450/600/800

Portable Ultra Low Temperature Freezer

PrimaSci便捷式超低温冰箱



PrimaSci便携式超低温冰箱采用最新的斯特林热泵制冷技术为客户提供全系列从+10to-86℃的超小型低温冰箱，具有可车载，低能耗，超轻便的特点。斯特林热泵制冷技术(FPSC)是最新的军工级技术，它使用少量的氦气作为热传输介质，取代了标准的制冷剂。相对于传统的冷却系统，这种新技术在环保及节能方面具有明显的优势，同时还能保证设备质量可靠，使用周期长且运行噪声极低。

Product Features | 产品特点

- 超小型：内部容积25L
- 真正的便携性，只有18公斤（空）
- 车载型：可在汽车或卡车上使用
- VIP的真空绝缘技术
- 低功耗，低噪音水平
- 较大的温度设定范围
- 易于清洗的冷凝器过滤器
- 集成式报警系统及锁定装置

Specifications | 技术参数

型号/订货号	PF4025	PF8025
容量	25 L	25 L
温度范围	+10℃ to -45℃	-20℃ to -86℃
微处理器	可调设定点，听觉/视觉温度报警	
噪声大小	45 dB(A)	45 dB(A)
冷却系统	自由活塞斯特林冷却器（FPSC）	
外部尺寸W x D x H mm	695 x 350 x 460	695 x 350 x 460
内部尺寸W x D x H mm	335 x 225 x 340	335 x 225 x 340
橱柜材料	较强的塑料外壳，铝制内饰	
绝缘	真空面板技术	
电源	直流 12 V 或100~240 V, 50/60 Hz	
平均功耗	0.06 kWh	0.12 kWh
净重	17 kg	18kg
装运重量和尺寸	28 kg	29 kg
W x D x H mm	900x600x700	900x600x700

Accessories | 附件

CL100	12V车载移动电源
BAC200	UPS军用电源

Handheld Homogenizer

PB100手持式匀浆机



PB100型高速组织匀浆机采用双重绝缘防护，手持式设计，方便拿取，单手可操作。也可固定在存储架上，所有的探头都是可更换的且方便清洗。适用于液体相互混合、乳化、均质，固体粉末在液体中的分散，植物或动物细胞组织的捣碎、匀浆等。本机通过高速剪切、分散，产生强大的液力剪切效应，使物料从转子下端吸入，通过定子喷射，最小处理量可至0.1m，是一款专为组织捣碎、医学诊断、质监检测、微量分散、乳化均质而开发的匀浆机，是您微量样品前处理的最佳选择。

Product Features | 产品特点

- 用来混合,乳化,切碎
- 手持式设计,双重绝缘防护
- 方便拿取,单手可操作,也可固定在存储架上
- 耐热耐压的不锈钢探头可高温高压消毒
- 所有的探头都是可更换的且方便清洗
- 高速马达,速度为0-35000rpm,10档可调,增量为3500rpm
- 样品体积范围:0.1to1000ml,根据探头的选择而定
- 探头由316型不锈钢制成
- 重量:3/4Kg

Specifications | 技术参数

型 号	工作体积 (ml)	探头直径 (mm)	探头长度(mm)
PB100-SP04	0.1-5.0	4	42
PB100-SP06	0.2-10	6	48
PB100-SP08	0.5-60	8	85
PB100-SP10	1-1000	10	140

备注：PB100整套由一个35,000 rpm的电机和一个自己选择的探头及一个塑料存储架组成。不管怎么选择探头，整套设备都是一个价格！

Mini Centrifuge

Palm Mini掌上离心机



Palm Mini离心机是一款手掌型个人离心机。其提供多种适配器更换转子，性能可靠，操作简单方便，是微型离心管和PCR管快速离心的理想设备。盖上盖子，转头瞬间达到7000rpm,打开盖子，转子迅速减速至停止，方便快速取走样品。标配含有6 x 1.5/2.0ml转子和16 x 0.2ml单个PCR管/2 x PCR八联管转子及 0.5ml和0.2ml适配器可供选择。按盖子颜色不同，有透明、蓝色、绿色、紫色、红色五种颜色可供选择。

Product Features | 产品特点

- 数秒内开启和停止
- 专利静音技术,超低噪音运行
- 外形精巧,体积小,节省宝贵的实验空间
- 大角度开盖,方便取放
- 更换转子,不需要任何工具,方便操作,节约时间
- 标配含有多个可互换的转头,一机多用,使用超值

Specifications | 技术参数

型号/订货号	Palm Mini
转速/离心力	7,000 rpm / 2,300 g
样品处理量	6 x 1.5/2.0ml ; 2 x 8联排PCR管 ; 6 x 0.2ml ; 6 x 0.5ml
外形尺寸 (W X D X H)	114 x 150 x 114 mm
重量	1 kg
电源	100-240V, 50-60 Hz, 250W
安全保护模式	开盖即停, 关闭电源停机不超过15秒, 开盖停机需3秒

Overhead Stirrer Multi Mixer

PM-1800 Plus 顶置式搅拌器



Product Features | 产品特点

- LCD显示,按键操作,简单方便
- 低维护电机,高扭矩输出
- 可设置连续搅拌或定时搅拌,转速记忆、过载保护等功能
- 可选不同的搅拌附件,优化搅拌方式以适应不同的情况
- 运行安静、可靠,可提供持续稳定的连续搅拌时间最长可达一周
- 强有力的动力系统,搅拌容量多达120升,可搅拌中高粘稠液体
- 电子过载保护



MP-1 划桨轮 MP-2 螺旋轮 MP-3 推进轮 MA-1 锚形轮 MC-1 离心轮 MC-2 扇片轮 MC-3 溶解轮 MC-4 飞片轮

Specifications | 技术参数

型号/订货号	PM-1800 Plus
搅拌速度	0 - 2000 rpm
最大搅拌体积	120 L
最大处理粘度	26000CP
转速控制方式	无极调速
转速显示	LCD X 1rpm
搅拌棒标准配置	扇片型搅拌桨
搅拌桨固定方式	转夹头
搅拌桨直径范围	2-13mm
电源	220 V
输入功率	510W
输出功率	300W
尺寸, W X D X H (mm)	350 x 250 x 750
重量	5.0Kg

High Speed Homogenizer

PD500-TP系列分散匀浆机



PD500-TP系列高性能分散匀浆机是一款专为生物制药、基因研究、组织破碎、细胞浆化、病理分析、乳品均质、聚合反应等实验与生产领域而研发的全新产品；具有操作方便、性能优越、噪音低、可无极变速控制且适合长时间运转等特点。所有的分散刀头都是可更换的且方便清洗灭菌。可选的多种分散刀头满足了其处理量从1 - 13,000 ml (H₂O)，宽广的转速范围(300 - 28,000 rpm)及数字显示转速功能确保了电机能及时有效补偿因负载变化和电源电压波动而引起的转速变化。

Product Features | 产品特点

- 数字显示转速可在300-2800rpm间任意调节
- 高强度塑料机壳,双重绝缘,保证使用安全
- 可配备五种不同的分散头,满足您不同处理量
- 分散头采用优势不锈钢材质特制,并有电烤漆涂层,可重复使用
- 分散头采用快速连接方式、便于拆卸更换及高温高压消毒
- 运转平稳、噪音低,不会加速变速
- 电子过载保护

Specifications | 技术参数

型号/订货号	PD500
转速 rpm	300-28000
最大处理粘度 cp	8000
处理量 (H ₂ O) ml	1-13000
转速显示	LED
功率 W	500
重量 kg	10
外形尺寸 mm	350x250x750
电源 V	220-240 (50-60HZ)
防护等级	IP20
工作架底座	标配




Matching Operating Head / Order Information | 配套刀头/订货信息

型 号	TP12	TP18	TP24	TP30	TP36
分散头长度 (mm)	110	210	230	230	230
分散头直径 (mm)	12	18	24	30	36
线速度 (m/s)	10	15	20	25	28
工作体积 (ml)	1-1000	50-1500	50-5000	50-8000	100-13000

High Shear Dispersing Emulsifier

PD300-TE高剪切分散匀浆机

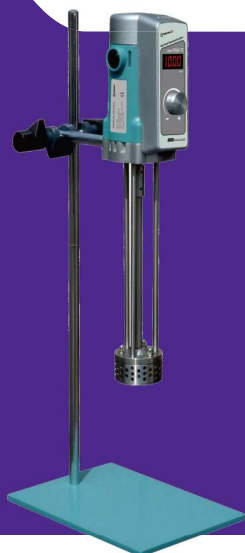


PD300-TE高剪切乳化分散机是一款专为生物制药、基因研究、组织破碎、细胞浆化、病理分析、乳品均质、聚合反应等实验与生产领域而研发的全新产品；具有操作方便、性能优越、噪音低、可无极变速控制且适合长时间运转等特点。所有的分散刀头都是可更换的且方便清洗灭菌。可选的多种分散刀头满足了其处理量从1 - 12,000 ml (H₂O)，宽广的转速范围(300 - 15,000 rpm)及数字显示转速功能确保了电机能及时有效补偿因负载变化和电源电压波动而引起的转速变化。

Product Features | 产品特点

- 数字显示转速,转速可在300-15000rpm间任意调节
- 高强度塑料机壳,双重绝缘,保证使用安全
- 可配备三种不同的转子,满足您不同工艺要求
- 转子采用优势不锈钢材质特制,并有电烤漆涂层,可重复使用
- 轴套使用铜合金材质、便于拆卸更换及高温高压消毒
- 运转平稳、噪音低,不会加速变速
- 电子过载保护

Specifications | 技术参数

型号/订货号	PD300
转速rpm	300-15000
最大处理粘度 cp	5000
处理量 (H ₂ O) ml	1-12000
转速显示	LED
功率 W	300
重量kg	10
外形尺寸mm	350x250x750
电源V	220-240 (50-60HZ)
防护等级	IP20
工作架底座	标配

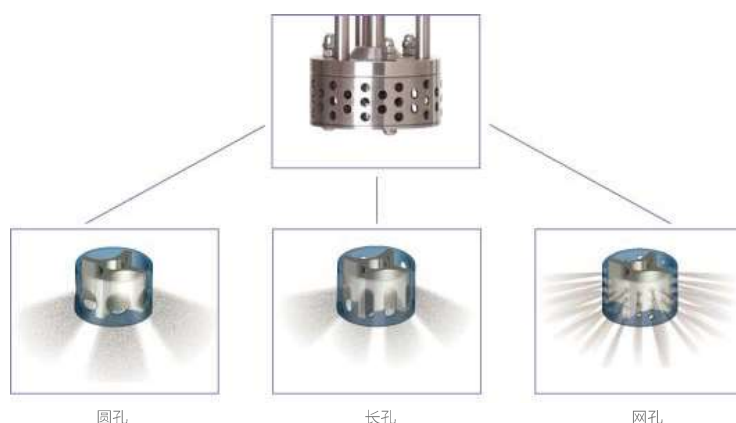

Refrigerated Incubators

IN150/IN250低温培养箱



PrimaSci IN系列低温培养箱采用了气套式加热和制冷系统，充分保证了快速精确的控温。另外，内部空气循环系统，确保温度的分布均匀。


PrimaSci低温培养箱广泛应用于制药，生命科学，水处理，生物研究，微生物学等领域。

Product Features | 产品特点

- 背光式LED显示器和直观易懂的控制面板
- PID微电脑控制器，带0至100小时整体式计时器
- 全不锈钢内胆，坚固耐用，内壁圆角设计，便于清洁
- 多达六步程序控温，最多99步循环
- 可调的超温报警及自动除霜功能，适用于低于环境温度下的长期应用
- 三重过温保护及开门报警功能，以保证样品及工作场所的安全
- 独特门封设计，防止热量损失，且可通过样品观察视窗监控样品状态
- 断电记忆功能，大大提高工作效率，绿色环保
- 具有可选的箱体内部照明及温度控制软件
- 具有可选的RS232接口转换器转换到打印机输出口，打印间隔时间可调

Specifications | 技术参数

型 号		IN150	IN250
不锈钢内腔	容量	L	250
	宽	mm	550
	高	mm	610
	深	mm	450
	最大 / 标准搁板数	5/2	7/3
不锈钢外壁	隔板最大承重量	18kg	18kg
	宽	mm	650
	高	mm	1050
其他数据	功率（加热时） U/S W	450	450
	功率（制冷时） U/S W	250	300
	观察窗	有	有
	净重	kg	90
	毛重	kg	110
温度精度	显示分辨率	℃	0.1
	温度稳定性	℃	± 0.25
	腔内温度均一性	℃	@20℃ ± 0.8℃
	温度范围	℃	4-60
安全装置	数显温度校正、传感器开路、短路报警、高温保护和低温报警、漏电保护、停电恢复		
可选装置	RS232/RS485 通讯接口及软件，测试孔，箱内电源插座，内部照明灯		

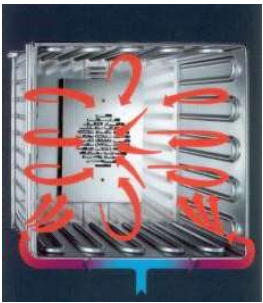

机械对流



隔 板

Drying Ovens

UN系列高温干燥箱



PrimaSci UN系列热风循环烘箱是采用强制对流方式的通用干燥箱，采用强制对流方式可取得较高的干燥效率，升温速度快。同时采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率，也有助于消除令人讨厌的雾。即使当满载的情况下，仍可以最大限度的确保温度恒定性。强制对流干燥箱广泛应用于科研院校、化验室、工矿企业对各种产品和材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下干燥和恒温试验。主要用途：干燥、培养、温热、实验、提证、消毒、老化、烧熔、检验、硬化、储存、科研等。

Product Features | 产品特点

- 强制对流的电子控制式APT.line内腔预热技术
- 四方向大面积加热，温度分布均匀
- 独特门封设计，防止热量损失
- PID微电脑控制器，带0至100小时整体式计时器
- 温度控制范围：室温 +5℃ 至260℃ 或plus款室温 +5℃ 至300℃ 可选
- 全不锈钢内胆，坚固耐用，内壁圆角设计，便于清洁
- 三重过温保护及开门报警功能，以保证样品及工作场所的安全
- 具有新鲜空气进入箱体及废气排放功能
- 具有透明钢化玻璃观察窗及程控功能可选
- 具有可选的RS232接口转换器转换到打印机输出口，打印机间隔时间可调

Specifications | 技术参数

型 号		UN65	UN130	UN230	UN400	UN700
不锈钢 内 腔	容量 L	65	130	230	400	700
	宽 mm	420	540	630	780	780
	高 mm	390	450	600	820	1420
	深 mm	400	540	600	630	630
不锈钢 外 壁	最大/标准搁板数	4/2	5/2	7/3	8/4	9/5
	宽 mm	550	650	750	940	940
	高 mm	770	850	1000	1360	1960
	深 mm	550	700	760	780	780
其他数据	功率（加热时）U/S W	1000	1400	2000	2000	2500
	观察窗	有	有	有	有	有
	净重 kg	50	65	72	80	90
	毛重 kg	58	75	85	95	105
温度精度	温控范围	5℃~260℃或5℃~300℃ (plus)可选				
	显示分辨率 ℃	0.1				
	温度稳定性 ℃	± 0.25				
	温度均一性 ℃	设定值± 1.5%				
安全装置	数显温度校正、传感器开路、短路报警、高温保护和低温报警、换气装置、漏电保护、停电恢复					
可选装置	RS232/RS485 通讯接口及软件，温度编程控制，测试孔					



机械对流



隔板

Incubators

UP系列恒温培养箱




PrimaSci UP系列恒温培养箱是采用低噪音高温轴流风扇和独特的风道设计，确保工作室内部风力分布均匀，可以最优化地加热和控制从较低温度直至+80℃。即使当满载的情况下，仍可以最大限度的确保温度恒定性。PrimaSci UP系列恒温培养箱广泛应用于制药，生命科学，水处理，生物研究，微生物学等领域的微生物、组织细胞培养。

Product Features | 产品特点

- 背光式LED显示器和直观易懂的控制面板
- 四方向大面积加热，温度分布均匀
- 独特门封设计，防止热量损失
- PID微电脑控制器，带0至100小时整体式计时器
- 温度控制范围：室温 +5℃至80℃
- 全不锈钢内胆，坚固耐用，内壁圆角设计，便于清洁
- 三重过温保护及开门报警功能，以保证样品及工作场所的安全
- 具有新鲜空气进入箱体及废气排放功能
- 独特门封设计，防止热量损失，且可通过样品观察视窗监控样品状态
- 断电记忆功能，大大提高工作效率，绿色环保
- 具有可选的温度控制软件
- 具有可选的RS232接口转换器转换到打印机输出口，打印机间隔时间可调

Specifications | 技术参数

型 号		UP65	UP130	UP230	UP400	UP700
不锈钢内腔	容量 L	65	130	230	400	700
	宽 mm	420	540	630	780	780
	高 mm	390	450	600	820	1420
	深 mm	400	540	600	630	630
不锈钢外壁	最大/标准搁板数	4/2	5/2	7/3	8/4	9/5
	宽 mm	550	650	750	940	940
	高 mm	770	850	1000	1360	1960
其他数据	深 mm	550	700	760	780	780
	功率（加热时）U/S W	1000	1400	2000	2000	2500
	观察窗	有	有	有	有	有
	净重 kg	50	65	72	80	90
	毛重 kg	58	75	85	95	105
温度精度	温控范围	5℃~80℃				
	显示分辨率	0.1				
	温度稳定性	± 0.25				
	温度均一性	设定值±1.5%				
安全装置	数显温度校正、传感器开路、短路报警、高温保护和低温报警、换气装置、漏电保护、停电恢复					
可选装置	RS232/RS485 通讯接口及软件，温度编程控制，测试孔					

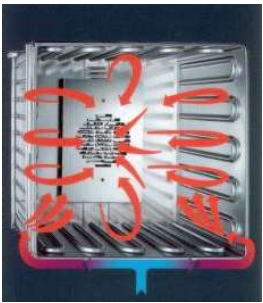

机械对流



隔板

Portable Water Quality Meter

INNOLAB 10系列便携式水质分析仪



innoLab 10系列便携式水质分析仪可监测水中pH、ORP、溶解氧、电导率、TDS、盐度、电阻率及各种离子浓度。innoLab 10系列仪表体积小、携带方便、可电池供电，适合实验室、制程、野外水质监测。

- 背面插槽设计，方便电极收纳
- 大屏LCD显示
- 具温度偏移补偿功能
- 具HOLD读值锁定功能
- 多点自动校准，多曲线设计，确保全量程准确
- IP65(pH)/IP67(CON/DO)防尘防水等级
- 两颗AA电池供电

Specifications | 技术参数

型 号	innoLab 10P	型 号	innoLab 10C	型 号	innoLab 10D
测量范围	-2.00~16.00pH -2000~2000mV	测量范围	电导率:0~5.000uS/cm,0~50.00uS/cm,0~500.0uS/cm,0~5000uS/cm,0~50.00mS/cm,0~500.0mS/cm,TDS:0~500ppt;盐度:0~325ppt;电阻率:0~18.30MΩ*cm;温度:-5.0~120.0℃/23.0~248.00°F	测量范围	0.00~40.00mg/L; 0.0~400.0%; -5.0~120.0℃/23.0~248.00°F
温度范围	-5.0~120.0℃/23.0~248.0°F	分辨率	电导率:0.001uS/cm(ppm),0.01uS/cm(ppm),0.1uS/cm(ppm),1uS/cm(ppm),0.01mS/cm(ppt),0.1mS/cm(ppt);电阻率:0.01MΩ*cm;温度:0.1℃/0.1°F	测量分辨率	0.01mg/L; 0.1%; 0.1℃/0.1°F
测量分辨率	0.01pH,0.1mV(-600.0~600.0),0.1℃/0.1°F	精确度	±1%F.S. ±0.3℃/±0.5°F	精确度	1.5% F.S., ±0.3℃/±0.5°F
精确度	0.01pH,0.2mV/1mV,0.3℃/0.5°F	温度补偿	自动温度补偿	校准	自动/手动
温度补偿	自动/手动温度补偿	参考温度	15.0~30.0℃ (出厂25.0℃)	盐度补偿	0.0~45.0ppt
pH电极	标准pH电极或铂电极	温度系数	0.00~9.99% (出厂2.00%)	温度补偿	自动/手动温度补偿
记忆功能	100组	TDS系数	0.40~1.00 (出厂0.50)	大气压力补偿	450~800mmHg/0.600~1.100bar
自动关机	无动作后10分钟	盐度系数	0.65	管道压力补偿	0.00~1.00Kg
校准	可连续校准5点(USA/NIST)系统可选	电极常数	0.01/0.1/1/10 (搭配指定电极)	液位深度补偿	0.0~10.0m
电源	电池AAx2	通讯接口	—	记忆功能	100组
防护等级	IP65	电源	电池AAx2	自动关机	无动作后10分钟
尺寸	73x152x42mm	防护等级	IP67	通讯接口	—
重量	250g	尺寸/重量	73x152x42mm/250g	电源	电池AAx2
				防护等级	IP67
				尺寸	73x152x42mm
				重量	250g

Portable Water Quality Meter

INNOLAB 10I便携式离子分析仪



PRIMASCI离子浓度计具有pH计和ISE离子浓度计双重功能，可检测pH、mV、温度及离子浓度，操作简单，具有自动识别标准缓冲液的功能，校准过程简单，大型液晶显示屏显示测量结果。

各量测模式可自定校准周期提示

可记录1000组读值记忆

大量程，高分辨率

可自由开关背光显示

连续7点标准液校准

高效USB数据传输

Specifications | 技术参数

型 号	innoLab 10I
测量范围	-2.000~20.000pH; -2000.0~2000.0mV; 0.000~9999mg/L
精确度	0.2%F.S. ± 3LSD; ± 0.1%F.S. ± 3LSD; ± 0.5%F.S. ± 3LSD
温度范围/精确度	-10.0~120.0°C/14.0~248.0°F; 0.3°C/ ± 0.5°F
温度补偿	自动/手动温度补偿
pH/mV 校准	pH可连续1~5点校准/ORP任1点可调
pH标准液系统	USA/NIST/DIN可选
ION校准	可连续1~7点校准
校准提醒设定	0~60天可选
记忆功能	1000组
自动关机	无动作后10分钟
读值稳定设定	三段可选
日期设定	YY/MM/DD; MM/DD/YY; DD/MM/YY可选
时制设定	12H/24H可选
通讯接口	USB
读值锁定功能	开启/关闭可选
温度偏移校准	± 5.0°C/ ± 9.0°F可调
电源/尺寸/重量	100~240VAC/150x194x56mm/1.0Kg

Ion electrode parameters | 离子电极参数

型 号	离子类型	测量浓度(M)	测量范围(ppm)	温度范围	pH范围	电极形态
IS-NH4LS	Ammonium(NH ₄ ⁺)铵	0.5~5×10 ⁻⁵	9000~0.9	0~50°C	0~8.5pH	凝胶电极
IS-FLS	Fluoride(F ⁻)氟	10~1×10 ⁻⁶	1900~0.02	5~50°C	4~8pH	凝胶电极
IS-CLLS	Chlorine(Cl ⁻)氯	1~3×10 ⁻⁶	35000~1	5~50°C	1~12pH	凝胶电极
IS-BrLS	Bromide(Br ⁻)溴	1~5×10 ⁻⁶	81000~0.4	5~50°C	1~12pH	凝胶电极
IS-CdLS	Cadmium(Cd ²⁺)镉	10~1×10 ⁻⁶	11200~0.1	5~50°C	3~7pH	凝胶电极
IS-CaLS	Calcium(Ca ²⁺)钙	10~5×10 ⁻⁷	4010~0.02	0~50°C	3.5~11pH	凝胶电极
IS-CuLS	Cupric(Cu ²⁺)铜	10~1×10 ⁻⁷	64000~0.006	5~50°C	2~7pH	凝胶电极
IS-CNLS	Cyanide(CN ⁻)氰	10~1×10 ⁻⁶	260~0.03	5~50°C	11~13pH	凝胶电极
IS-ILS	Iodide(I ⁻)碘	1~5×10 ⁻⁷	127000~0.06	0~50°C	2~12pH	凝胶电极
IS-PbLS	Lead(Pb ²⁺)铅	10~1×10 ⁻⁶	20800~0.02	0~50°C	3~7pH	凝胶电极
IS-NO3LS	Nitrate(NO ₃ ⁻)硝酸根	1~7×10 ⁻⁶	62000~0.4	0~50°C	2~11pH	凝胶电极
IS-KLS	Potassium(K ⁺)钾	1~10 ⁻⁶	39000~0.04	0~50°C	1~9pH	凝胶电极
IS-AgLS	Silver(Ag ⁺)银	10~1×10 ⁻⁷	107900~0.01	5~50°C	1~9pH	凝胶电极
IS-S2LS	Sulphide(S ₂ ⁻)硫	1~1×10 ⁻⁷	3200~0.003	0~50°C	13~14pH	凝胶电极
IS-NaLS	Sodium(Na ⁺)钠	3~10 ⁻⁷	69000~0.002	0~50°C	1~9pH	玻璃电极
IS-NH3LS	Ammonia(NH ₃)氨	1M~10 ⁻⁶ M	0.02	0~50°C	11~13pH	气敏电极

离子电极材质为Epoxy/PVC或Teflon，线长1m，BNC接头

Benchtop Water Quality Meter

INNOLAB 20系列台式水质分析仪



innoLab 20系列台式分析仪测监测水中pH /ORP、溶解氧、电导率/电阻率/盐度、离子浓度。主要用于实验室中，适合饮用水、污废水、养殖水、泳池水、工业用水等各种水体中水质指标分析。

超大LCD显示屏，120° 大视角
自动关机功能
温度偏移调整功能
具HOLD读值锁定功能
可自由开关高亮度背光
内置可充电锂电池，确保不断电
电极效能指示，已校准点数显示
USB传输界面，可外接电脑

Specifications | 技术参数

型 号	innoLab 20P
测量范围	-2.00 16.00pH -2000 2000mV -5.0 120.0°C/23.0 248.0°F
分辨率	0.01pH/0.1mV(-600.0 600.0)/0.1°C/0.1°F
精确度	0.01pH, 0.2mV/1mV, 0.3°C/ 0.5°F
温度补偿	自动/手动温度补偿
pH电极	标准pH电极或锑电极
记忆功能	100组
自动关机	无动作后10分钟
校准	可连续校准5点(USA/NIST)系统可选
通讯接口	USB
电源	100 240 VAC
防护等级	IP54
尺寸	150x194x56mm
重量	1.0Kg

型 号	innoLab 20C
测量范围	电导率: 0~5.000uS/cm,0~50.00uS/cm,0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm,0~50.00mS/cm,0~500.0mS/cm; TDS: 0~500ppt; 盐度: 0~325ppt; 电阻率: 0~18.30M Ω *cm; 温度: -5.0~120.0°C/23.0~248.0°F
分辨率	电导率: 0.001uS/cm(ppm),0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm),1uS/cm(ppm)0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt)电阻率: 0.01M Ω *cm; 温度: 0.1°C/0.1°F
精确度	± 1%F.S.; ± 1%F.S.; ± 0.3°C/ ± 0.5°F
温度补偿	自动温度补偿
参考温度	15.0~30.0°C (出厂25.0°C)
温度系数	0.00~9.99% (出厂2.00%)
TDS系数	0.40~1.00 (出厂0.50)
盐度系数	0.65
电极常数	0.01/0.1/1/10 (搭配指定电极)
通讯接口	USB
电源	100~240 VAC
防护等级	IP54
尺寸/重量	150x194x56mm/1.0Kg

型 号	innoLab 20D
测量范围	0.00~40.00mg/L, 0.0~400.0%-5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F
测量分辨率	0.01mg/L,0.1%,0.1°C/0.1°F
精确度	1.5% F.S., 0.3°C/ 0.5°F
校准	自动 / 手动
盐度补偿	0.0~45.0ppt
温度补偿	自动 / 手动温度补偿
大气压力补偿	450~800mmHg/0.600~1100bar
管道压力补偿	0.00~100Kg
液位深度补偿	0.0~10.0m
记忆功能	100组
自动关机	无动作后10分钟
通讯接口	USB
电源	100~240VAC
防护等级	IP54
尺寸	150x194x56mm
重量	1.0Kg

Benchtop Water Quality Meter

INNOLAB20I台式离子分析仪



innoLab 20I主要用于饮用水、污水、养殖水、工业用水等水样中离子浓度实验室分析。

超大LCD显示屏，120° 大视角

自动关机功能

温度偏移调整功能

具HOLD读值锁定功能

可自由开关高亮度背光

内置可充电锂电池，确保不断电

电极效能指示，已校准点数显示

USB传输界面，可外接电脑

Specifications | 技术参数

型 号	innoLab 20I
测量范围	-2.000~20.000pH/-2000.0~2000.0mV; 0.000~9999mg/L; -10.0~120.0°C/14.0~248.0°F ;
精确度	0.2%F.S. ± 3LSD/ ± 0.1%F.S. ± 3LSD; ± 0.5%F.S. ± 3LSD ; - 0.3°C/ ± 0.5°F;
温度补偿	自动/手动温度补偿
pH/mV校准	pH可连续15点校准 / ORP任1点可调
pH标准液系统	USA / NIST / DIN 可选
ION校准	可连续17点校准
校准提醒设定	0~60天可选
记忆功能	1000组
自动关机	无动作后10分钟
读值稳定设定	三段可选
密码设定	四位数码可自行设定
产品序号	四码，可自行设定
用户序号	两码，可自行设定
日期设定	YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可选
时制设定	12H / 24H可选
通讯接口	USB
读值锁定功能	开启 / 关闭可选
温度偏移校准	± 5.0°C / ± 9.0°F可调
电源/尺寸/重量	100~240VAC/150x194x56mm/1.0Kg

Ion electrode parameters | 离子电极参数

型 号	离子类型	测量浓度(M)	测量范围(ppm)	温度范围	pH范围	电极形态
IS-NH4LS	Ammonium(NH4 ⁺)铵	0.5 × 10 ⁻⁵	9000~0.9	0~50°C	0~8.5pH	凝胶电极
IS-FLS	Fluoride(F ⁻)氟	10~1 × 10 ⁻⁶	1900~0.02	5~50°C	4~8pH	凝胶电极
IS-CLLS	Chlorine(Cl ⁻)氯	1~3 × 10 ⁻⁶	35000~1	5~50°C	1~12pH	凝胶电极
IS-BrLS	Bromide(Br ⁻)溴	1~5 × 10 ⁻⁶	81000~0.4	5~50°C	1~12pH	凝胶电极
IS-CdLS	Cadmium(Cd ²⁺)镉	10~1 × 10 ⁻⁶	11200~0.1	5~50°C	3~7pH	凝胶电极
IS-CaLS	Calcium(Ca ²⁺)钙	10~5 × 10 ⁻⁷	4010~0.02	0~50°C	3.5~11pH	凝胶电极
IS-CuLS	Cupric(Cu ²⁺)铜	10~1 × 10 ⁻⁷	64000~0.006	5~50°C	2~7pH	凝胶电极
IS-CNLS	Cyanide(CN ⁻)氰	10~1 × 10 ⁻⁶	260~0.03	5~50°C	11~13pH	凝胶电极
IS-ILS	Iodide(I ⁻)碘	1~5 × 10 ⁻⁷	127000~0.06	0~50°C	2~12pH	凝胶电极
IS-PbLS	Lead(Pb ²⁺)铅	10~1 × 10 ⁻⁶	20800~0.02	0~50°C	3~7pH	凝胶电极
IS-NO3LS	Nitrate(NO ₃ ⁻)硝酸根	1~7 × 10 ⁻⁶	62000~0.4	0~50°C	2~11pH	凝胶电极
IS-KLS	Potassium(K ⁺)钾	1~10 ⁻⁶	39000~0.04	0~50°C	1~9pH	凝胶电极
IS-AgLS	Silver(Ag ⁺)银	10~1 × 10 ⁻⁷	107900~0.01	5~50°C	1~9pH	凝胶电极
IS-S2LS	Sulphide(S ₂ ⁻)硫	1~1 × 10 ⁻⁷	3200~0.003	0~50°C	13~14pH	凝胶电极
IS-NaLS	Sodium(Na ⁺)钠	3~10 ⁻⁷	69000~0.002	0~50°C	1~9pH	玻璃电极
IS-NH3LS	Ammonia(NH ₃)氨	1M~10 ⁻⁶ M	0.02	0~50°C	11~13pH	气敏电极

离子电极材质为Epoxy/PVC或Teflon，线长1m,BNC接头

英国GREENPRIMA (原PRIMA)公司致力于水质分析仪表及实验室通用设备的研发与制造，专业为客户提供在线水质测量和实验室前处理整套仪器设备解决方案，旗下拥有GreenPrima及PRIMASCI(PRIMA)两大品牌。PRIMASCI主要涉及水浴干浴、匀浆分散、振荡离心、超声清洗、烘箱/培养箱、便携/台式水质检测等多产品系列，产品已销往全球多个国家及地区，主要客户类型包括科研院所、医疗机构、食品制药等企业。戈普仪器（上海）有限公司全权负责英国GREENPRIMA全线产品在中国区的市场推广及技术服务。

GREENPRIMA designs, manufactures and markets a wide range of water quality analysis instruments and laboratory pretreatment equipment. Its multiple brands GreenPrima and PrimaSci offer you solutions tailored to your water analysis and laboratory pretreatment requirements. PrimaSci involves multiple product series such as water bath, dry bath, Homogenizer, Stirrer, Centrifuges, Ultrasonic cleaning, Oven, Incubator, Portable/Bench water quality meter, Which have been sold to scientific reserch institutes, medical institutions, food and pharmaceutical factories and so on, among others, in various countries and regions globally. Greenprima instruments(Shanghai) Co.,Ltd is responsible for the marketing and technical services of GREENPRIMA products in China.

戈普仪器（上海）有限公司

Tel: 021-39597199

Fax: 021-59918963

E-Mail: Chinainfo@greenprimainst.com

Web: www.greenprimainst.com.cn

售后服务热线：4009-2020-89

代理商